



Gangbarre

Ropox gangbarre kan bruges ved f.eks. gangtræning, balancetræning og træning i stående stilling.

Gangbarren kan bruges i ergo- og fysioterapier på sygehuse, institutioner, klinikker, dagcentre og i motions- og træningscentre eller gymnastiksale.

- Gangbarren leveres i to modeller med trinvis eller trinløs indstilling af højden.

- Begge er modulopbyggede, så længden kan ændres efter behov.

- Gangbarre med trinløs højdeindstilling:

Fodplader: Gangbarren er monteret med gasfjeder-unit i den ene ende og beslag i den anden ende. Den boltes fast i gulvet.

Længde: 3, 4, 5, 6 og 7 meter.

Bredde: Anbefalet bredde: 70 cm, men kan monteres i andre bredder efter behov.

Højde: Indstilles trinløst mellem 79 og 103 cm.

Højden indstilles ved at træde på pedalen på gasfjeder-unitten og skubbe barren til den ønskede højde.

Max. belastning: 130kg

- Gangbarre med trinvis højdeindstilling:

Fodplader: Gangbarren er monteret med 2 fodplader.

Længde: 3, 4, 5, 6 og 7 meter.

Bredde: Bredden indstilles mellem 0 og 70 cm ved at parallelforskyde barrierne.

Højde: Indstilles trinvis mellem 83 og 108 cm.

Spændeskruerne på barrens ben løsnes, højden indstilles trinvis ved hjælp af en split og sikres ved at skrue spændeskruerne fast igen.

Max. belastning: 175 kg.


Gangbarre

Trinløs højdeindstilling

Gangbarre 3 meter

4. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
3. 10-15301-9 Gasfjeder unit
2. 10-15302-9 Slaveben
1. 10-15303-9 Rør med buk


Komplet sæt 10-15313-9

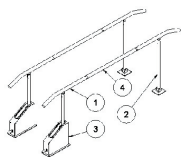

Gangbarre 4 meter

4. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
3. 10-15301-9 Gasfjeder unit
2. 10-15302-9 Slaveben
1. 10-15303-9 Rør med buk


Komplet sæt 10-15314-9

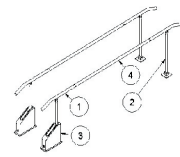

Gangbarre 5 meter

5. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
4. 10-15304-9 Mellemstykke med kobling
3. 10-15301-9 Gasfjeder unit
2. 10-15302-9 Slaveben
1. 10-15303-9 Rør med buk


Komplet sæt 10-15315-9

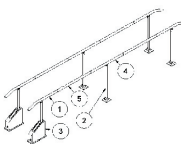

Gangbarre 6 meter

6. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
5. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
4. 10-15304-9 Mellemstykke med kobling
3. 10-15301-9 Gasfjeder unit
2. 10-15302-9 Slaveben
1. 10-15303-9 Rør med buk


Komplet sæt 10-15316-9

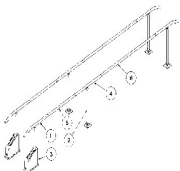

Gangbarre 7 meter

5. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
4. 10-15304-9 Mellemstykke med kobling
3. 10-15301-9 Gasfjeder unit
2. 10-15302-9 Slaveben
1. 10-15303-9 Rør med buk

Komplet sæt 10-15317-9

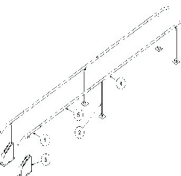


Trinvis højdeindstilling

Gangbarre 3 meter

3. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
2. 10-15104-9 Rør m. buk inkl. lodret rør
1. 10-15100-9 Fodplade


Komplet sæt 10-15113-9

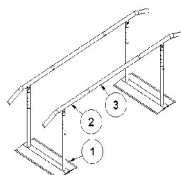

Gangbarre 4 meter

3. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
2. 10-15104-9 Rør m. buk inkl. lodret rør
1. 10-15100-9 Fodplade


Komplet sæt 10-15114-9

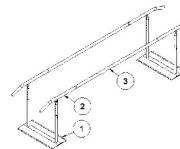

Gangbarre 5 meter

4. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
3. 10-15101-9 Mellemstyk. inkl. lodret rør
2. 10-15104-9 Rør m. buk inkl. lodret rør
1. 10-15100-9 Fodplade


Komplet sæt 10-15115-9

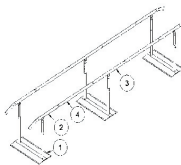

Gangbarre 6 meter

5. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
4. 10-15103-9 Mellemstykke 1m
3. 10-15101-9 Mellemstyk. inkl. lodret rør
2. 10-15104-9 Rør m. buk inkl. lodret rør
1. 10-15100-9 Fodplade


Komplet sæt 10-15116-9

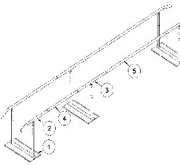

Gangbarre 7 meter

4. 10-15102-9 Mellemstykke 2m
3. 10-15101-9 Mellemstyk. inkl. lodret rør
2. 10-15104-9 Rør m. buk inkl. lodret rør
1. 10-15100-9 Fodplade

Komplet sæt 10-15117-9

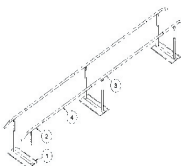

ROPOX

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

ROPOX A/S
Ringstedgade 221
DK-4700 Naestved
Tel. +45 5575 0500
Fax +45 5575 0550
info@ropox.dk
www.ropox.com